

# Leukomed<sup>®</sup> T plus

*Waterdichte en transparante eilandpleister*

## *Eigenschappen en functies*

---

**Leukomed T plus** is een steriele eilandpleister op basis van een flexibele en waterdichte folie. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de patiënt zonder extra bescherming onder de douche kan.

De huid krijgt de kans om te ademen en past zich aan de contouren van het lichaam aan. In combinatie met de huidvriendelijke kleefmassa geeft dit Leukomed T plus een huidvriendelijk karakter. Ook patiënten met een gevoelige huid verdragen Leukomed T plus probleemloos.

Het wondkussen van Leukomed T plus is voorzien van een polypropyleenlaag, die verkleving aan de wond tegengaat. Omdat Leukomed T plus geen stralingsabsorberende bestanddelen bevat, hoeft de hechtpleister niet verwijderd te worden bij röntgenologisch onderzoek. Bovendien gaat de pleister geen chemische reactie aan met rubbers of plastics.

Leukomed T plus is makkelijk aan te brengen. Bij verwijderen laat Leukomed T plus bovendien geen lijmresten achter. Zie ommezijde voor aanbreng- en verwijder-instructies.

## **Dragermateriaal**

Extra dunne en flexibele polyurethaanfolie

## **Kleefmassa**

Huidvriendelijk polyacrylaat

## **Wondkussen**

Vochtopnemend viscosevlies

## *Toepassingen*

---

- Post-operatieve wondpleister
- Bij behandeling van o.a. snij- en schaafwonden
- Ideaal als bescherming tegen externe factoren als vocht en vuil



**Leukoplast<sup>®</sup>**


Wound care in best hands

Leukomed T plus - per 50					
7,2 x 5 cm	72382-00	1	1 x 8 (8)	15102998	
8 x 10 cm	72382-01	1	1 x 6 (6)	15103005	
8 x 15 cm	72382-02	1	1 x 6 (6)	15103013	
10 x 25 cm	72382-03	1	1 x 8 (8)	15103021	
10 x 30 cm	72382-04	1	1 x 8 (8)	15103048	
10 x 35 cm	72382-05	1	1 x 8 (8)	15103056	

# Aanbrenginstructie


## Leukomed® T plus

**1.**

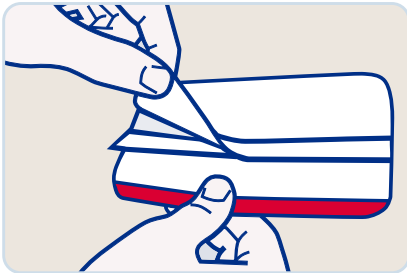


Verwijder het grootste schutblad.

**2.**

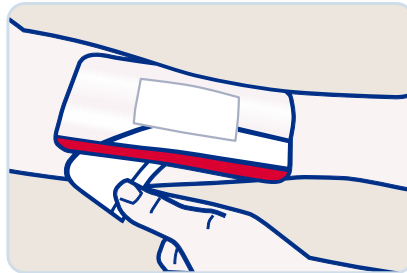


Plaats de eilandpleister op de huid en verwijder het tweede schutblad.

**3.**

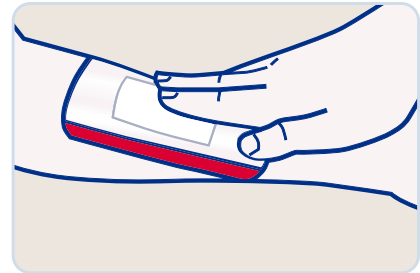


Wrijf de eilandpleister aan.

**4.**

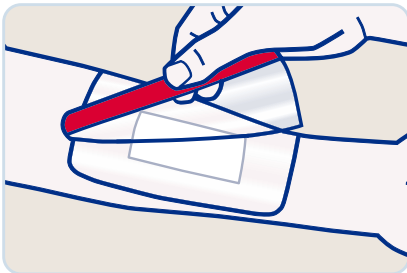

Pak de transparante toplaag vast bij de rode strip en verwijder deze voorzichtig.

**5.**

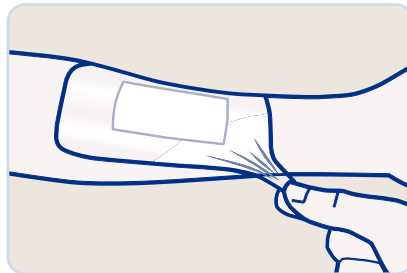

Verwijderen: maak voorzichtig een hoekje los. Door de folie hierna evenwijdig aan de huid uit te rekken is de folie patiëntvriendelijk te verwijderen.