



BLUTABNAHMESTUHL
BLOEDAFNAMESTOEL

Deneo®.Lab



Vers.: 01-2018




DENEØ® überzeugt durch gebündelte Innovationen, die dem Patienten den Zugang erleichtern und für Patienten und Behandelnde gleichermaßen Bequemlichkeit schaffen. Das DENEØ®-Konzept ist das Ergebnis von langen Voruntersuchungen und zahlreichen Begegnungen mit Vertretern aus der Laborpraxis. Das Entwicklungsergebnis wurde zum Patent und Gebrauchsmusterschutz angemeldet.

DENEØ® is een concentraat van vernieuwingen voor een betere toegankelijkheid voor de verzorging van de patiënt en voor een groter comfort voor zowel de patiënt als de arts. Het ontwerp van DENEØ® is het resultaat van langdurig en uitgebreid onderzoek en vele praktijktests met laboratoriumprofessionals. Dit onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de aanvraag van octrooi en het deponeren van de modellen.

KOMFORT COMFORT

- Um 360° drehbar (bei bestimmten Modellen)
- Begrenzter Raumbedarf = optimale Raumnutzung
- Bodyshape®-Polsterung: körpergerechte Position
- 360° wenteling (op bepaalde modellen)
- Beperkte afmetingen, optimaal gebruik van de ruimte
- Bekleding Bodyshape®: natuurlijke stand

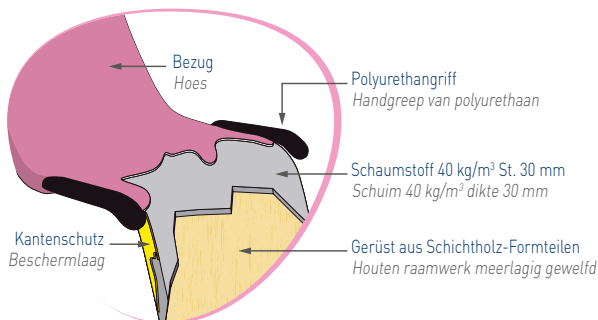

HYGIENE / HYGIENE

- Bezug mit antibakteriellem Schutz (je nach gewählter Farbe, siehe Farbpalette)
- Vereinfachte Reinigung
- Nahtlose geformte Polsterauflage
- Abnehmbare Handgriffe
- Stoffierung mit bacteriewerende bescherming (afhankelijk van de kleurkeuze, zie kleurenoverzicht)
- Gemakkelijk te reinigen
 - Naadloze bekleding
 - Afneembare handgrepen



SICHERHEIT VEILIGHEID

- Notfallposition leicht und schnell erreichbar, kein Krafteinsatz
- Armstützen an der Rückenlehne und integrierte Griffe = lange Lebensdauer
- Rundfuß: sorgt für Kippsicherheit
- Polsterung feuerbeständig M1 (je nach gewählter Farbe, siehe Farbpalette)
- Patientengewicht: 200 kg
- Noodpositie gemakkelijk, moeiteloos en snel
 - Armsteun aan rugleuning bevestigd en handgrepen geïntegreerd → levensduur
 - Ronde voet: stabiliteit van de stoel
 - Zitting van M1 vuurvertragende stoffering (afhankelijk van de kleurkeuze, zie kleurenoverzicht)
 - Maximum gewicht patiënt: 200 kg



Zum Patent angemeldetes Modell
Gedeponeerd model

ZUGÄNGLICHKEIT TOEGANKELIJKHEID

- Sit'n Go®-Konzept: Einstiegsposition 50 cm über dem Fußboden (je nach Modell)
- Änderung des Beinstützenwinkels = bequemer Zugang
- Sit'n Go® concept: ontvangstand op 50 cm van de grond (afhankelijk van het model)
- Aangepaste hoek van de kniesteunen voor gemakkelijkere toegang

Sit'n Go®-Konzept (je nach Modell) / Sit'n Go® concept (afhankelijk van het model)




Der Patient stützt sich an den beiden Seitengriffen ab - der Sessel schwenkt in die Einstiegsposition. De patiënt steunt op de 2 handgrepen aan weerszijden van de stoel, waardoor de stoel de ontvangstand aanneemt.

Der Sessel schwenkt ohne Eingriff des Personals zurück. De stoel gaat weer in de oorspronkelijke stand staan zonder dat daarbij interventie nodig is.



Die Notfallposition kann jederzeit eingenommen werden und wahrt gleichzeitig die Armposition bzgl. des Rumpfs. Op ieder moment kan de stoel in de noodpositie gezet worden door de armen op de armsteunen te houden, aan weerszijden van het lichaam.

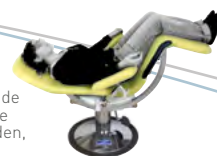

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Feste Sitzhöhe (50 cm) oder hydraulisch verstellbare Sitzhöhe (einstellbar von 51 bis 71 cm)
- Struktur und Rund Fuß mit hellgrauer Epoxidbeschichtung (Art. Nr. 80010-02R+80015-02R)
- Säule mit hellgrauer Epoxidbeschichtung und verchromter Rund fuß (Art. Nr. 80010-02R+80015-02R)
- Verchromte Säule und Rund Fuß (Art. Nr. 80010-02R+80015-02R)
- 2 in Sitzhöhe integrierte Polyurethan-Handgriffe
- Einteilige nahtlose Polsterung, feuerbeständiger Bezug (M1), Schaumstoff Stärke 30 mm, Dichte 40 kg/m³
- 2 abnehmbare Armstützen, gebogen, Kugelgelenk, mit Schaumstoff und feuerbeständigem Bezug (M1), nahtlos warmgeformt
- Zulässig bis max. Patienten-Körpergewicht von 200 kg (statische Tests bis 500 kg)




STANDAARD EIGENSCHAPPEN

- Vaste hoogte (zitting 50 cm) en hydraulisch hoogte verstelbaar (zitting verstelbaar van 51 tot 71 cm)
- Structuur en epoxy grijs wolkendek (Ref80010-02R+80015-02R)
- Column epoxy grijze wolk en verchromde corolla (ref 80000-02R+80005-02F+80005-02R)
- Kolom en chroom cirkelvormige basis (ref 80070-02R+80075-02R)
- 2 polyurethaan handgrepen geïntegreerd bij de zitting
- Zitting uit één stuk, naadloos, M1 bekleding, dikte schuim 30 mm, dichtheid 40 kg/m³
- 2 afneembare armsteunen, gebogen scharnier met schuim en naadloze thermogevormde M1 bekleding
- Maximum toegestane patiëntgewicht van 200 kg (statisch getest bij 500 kg)


Modelle Modellen	Feste Sitzhöhe, Rundfuß Vaste hoogte ronde voet	Feste Sitzhöhe mit 4-Rollen-Gestell, ø 50 mm Vaste hoogte voet 4 wielen ø 50 mm	Höhenverstellung hydraulisch Hydraulisch hoogte verstelbaar	Mit Rundumdrehung Met wenteling	Sit'n Glo -Konzept concept
80000-02R	●			●	●
80010-02R		●		●	●
80070-02R			●	●	●
80005-02F	●				
80005-02R	●			●	
80015-02R		●		●	
80075-02R			●	●	

Alle Modelle haben den neuen Beinstützenwinkel zur Einstiegserleichterung.
Alle modellen zijn voorzien van de nieuwe kniesteun hoek voor een gemakkelijke toegang.

Raumoptimierung Ruimtebesparing

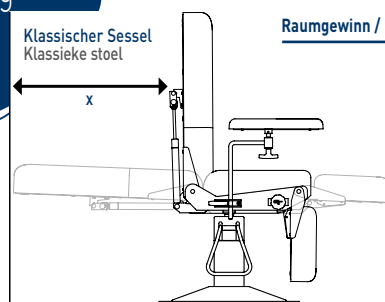

Raumgewinn / Plaats

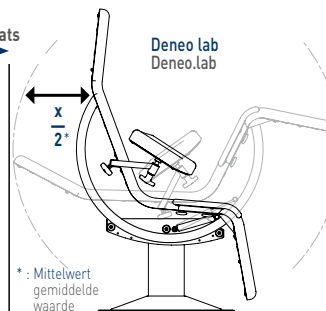

* : Mittelwert
gemiddelde
waarde

Mit der Rundumdrehung kann das Personal Abnahmen links oder rechts durchführen, ohne den Platz zu wechseln.

Door de 360° wenteling kan de arts zonder zich te verplaatsen de afnames doen.



Zubehör Accessoires




167-10
Papierrollenhalter
(Max.-Länge 50 cm, ø 20 cm)
Papierrolhouder
(max. lengte 50 cm, ø 20 cm)



957
Halterung für klemmen
Lamphouder klemmen




964
Tablett, einzeln
Blad los
(240 x 180 x 30 mm)

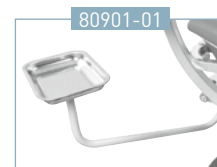

80901-01
Tablett mit festem
Schwenkarm (links / rechts)
Blad met vaste draaiarm
(rechts / links)



80193+80920-01
Infusionsständer
Infuushouder

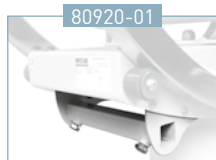

80920-01
Spannbefestigungsträger
(Fuß- oder Kopfende)
Klemhouder
(been- of hoofdzijde)



80921-01+80920-01
Spannbefestigung für
Zubehör ø 16 mm
Klemmen voor accessoires
ø 16 mm



80921-01+80920-01
Lampen
Zie de documentatie



80905-01
Plastiksenschutz (Fußende)
Kunststof bescherming
(beenzijde)



80906-01
Plastikschutz (Kopfende)
Kunststof bescherming
(hoofdzijde)

Optionen/Opties*

* Bitte unbedingt bei der Bestellung angeben, Montage im Werk! Meedelen bij bestelling, montage in fabriek



80922-10
Paar Hilfsgriffe
Paar hulphandgrepen

Polsterauswahl, feuerbeständig M1,
antibakteriell
Keuze voor M1vuurvertragende
stoffering – Bacteriewerend

Classic

32 - BLUE

93 - COTTAGE

35 - RED

34 - YELLOW

91 - WHITE

92 - MARINE

56 - DARKNESS

57 - ANTISTATIC
Keine Einstufung nach Brandschutzklasse M1
Niet M1-ingedeeld

Vitamin

64 - GRAPE

67 - LAGOON

66 - SWEET

63 - CEDRAT

Cosy

80 - SKY

81 - SEA GREEN

65 - LILAC

96 - TIN

82 - MOUSE GREY

83 - NATURAL

84 - CHOCOLATE

ANTIBAKTERIEEL / FEUERBESTÄNDIG KL. M1 - BACTERIEWEREND / BRANDVEILIG M1



Feste Höhe Standaardhoogte

Netto-Gew.
Netto gewicht
53 kg

Brutto-Gew.
Bruto gewicht
67 kg

Volumen/Volume
1,164 m³


Höhenverstellung hydraulisch Hydraulisch hoogte verstelbaar

Netto-Gew.
Netto gewicht
60 kg


Brutto-Gew.
Bruto gewicht
74 kg

Volumen/Volume
1,164 m³


Feste Sitzhöhe, Rundfuß / Vaste hoogte ronde voet

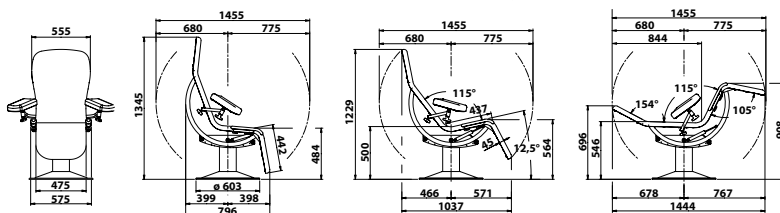

Höhenverstellung hydraulisch / Hydraulisch hoogte verstelbaar

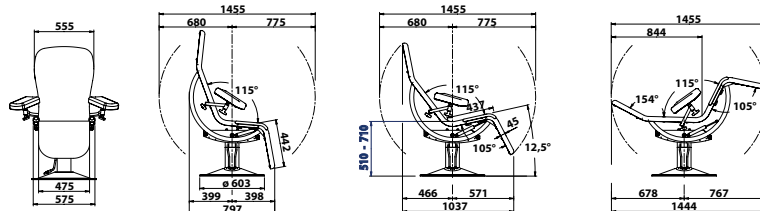

Feste Sitzhöhe mit 4-Rollen-Gestell / Vaste hoogte op voet met 4 wielen

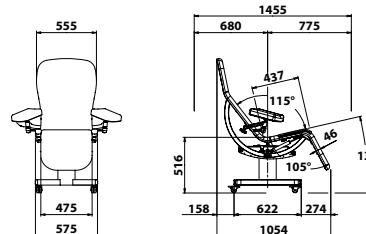

AH-02/18