



ELEKTRISCH VERSTELLBARER  
GYNÄKOLOGIESTUHL  
ELEKTRISCHE GYNAECOLOGISCHE  
TAFEL

# ELANSA



11614-01  
mit Zubehör / met accessoires

Vers.: 01-2019



# ELANSA

EFFIZIENT UND EINFACH  
IN DER ANWENDUNG

EFFICIENT EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

## KOMFORT COMFORT

- 1 E-Motor
- Rückenlehne verstellbar durch Gaszylinder
- Beidseitige Befestigungsmöglichkeit für Kolposkop
- Kombinierte Bewegungen des Hubs und der Rückenlehne
- Bedienung am Fußteil
- 1 Elektrische motor
- Rugleuning verstelbaar met gasveer
- Bilaterale bevestiging voor colposcoop
- Gecombineerde beweging van hoogte en rugleuning
- Voetbediening



## SICHERHEIT / VEILIGHEID

- Belastbar bis 170 kg
- Notfallposition 11°
- Potentialausgleichsklemme: ermöglicht den Potentialausgleich zwischen verschiedenen elektromedizinischen Geräten
- Capaciteit 170 kg
- Noodpositie 11°
- Potentiaalvereffening: vereffening van spanningsverschillen tussen verschillende elektromedische toestellen



## HYGIENE HYGIENE

- Anatomische, nahtlose, abnehmbare Polsterung
- Stahlgestell mit hellgrauer Epoxid-Beschichtung
- Integrierter Papierrollenhalter
- ABS-Behälter verschiebbar und abnehmbar auf Schienen
- Wasserdichtes Sitzpolster
- Räder mit Bremsen (optional)
- Naadloze, verwijderbare, anatomische bekleding
- Stalen structuur met ABS coating wolkrijgs
- Geïntegreerde papierrolhouder
- Glijdende en verwijderbare ABS-lade op rails
- Waterdicht kussen van zitting
- Zwenkwiel met rem (optioneel)



Gezeigtes Modell mit Optionen/Zubehör  
Model weergegeven met opties/accessoires

## ZUGÄNGLICHKEIT TOEGANKELIJKHEID

- Elektrische Höhenverstellung von 46 bis 106 cm
- Aussparung im Sockel für optimale Zugänglichkeit zum Patienten
- Möglichkeit der Durchführung einer allgemeinen Untersuchung (Polster als Zubehör)
- 3 Modelle für die Anpassung an alle Praktiken (Haltebügel, Beinhalter nach Goepfel, Fußstütze)
- Elektrische hoogte verstellbaar van 46 tot 106 cm
- Uitsparing in het frame voor een betere bereikbaarheid van de patiënt
- Mogelijkheid voor het uitvoeren van een algemeen onderzoek (kussen als accessoire)
- 3 modellen voor gebruik bij alle praktijken (hielsteunen, Goepfel, voetensteun)



Einstieg  
Zitten



Allgemeine Untersuchung  
Algemeen onderzoek



Gynäkologie  
Gynaecologie



Notfallposition  
Noodpositie

## STANDARDAUSFÜHRUNG

Elektrische Höhenverstellung von 46 bis 106 cm  
 Kombinierte Einstellung von Höhe und Rückenlehne (1 Motor)  
 Einstellung von Rückenlehne durch Gasfeder  
 Potenzialausgleichsbuchse  
 Fußpedalbedienung  
 Gleiter unter dem Fußgestell  
 ABS-Behälter verschiebbar und abnehmbar auf Schienen  
 (Volumen 6 Liter)  
 Beidseitiger Befestigungspunkt für Kolposkophalterungsuubehör  
 Stahlgestell mit hellgrauer Epoxid-Beschichtung  
 Anatomische, nahtlose, abnehmbare Polsterung  
 Papierrollenhalter (Max. Länge 50 cm - ø 12,5 cm)  
 Zulässig bis max. Patienten-Körpergewicht von 170 kg  
 (dynamische Tests bis 210 kg und statische Tests bis 680 kg)

## STANDAARD EIGENSCHAPPEN

Elektrische hoogte verstelbaar van 46 tot 106 cm  
 Gecombineerde beweging van hoogte en rugleuning (1 motor)  
 Hellingshoek van rugleuning met gasveer  
 Equipotentiaalaansluiting  
 Voetbediening  
 Verstelbare voetjes onder frame  
 Glijdende en verwijderbare ABS-lade op rails  
 (capaciteit 6 liter)  
 Bilateraal verankeringspunt voor de steunaccessoires bij colposcopie  
 Stalen structuur met ABS coating wolkrijgs  
 Naadloze, verwijderbare, anatomische bekleding  
 Papierrolhouder (lengte max. 50 cm - ø 12,5 cm)  
 Max. toegestane patiëntgewicht van 170 kg  
 (dynamisch getest bij 210 kg en statisch bij 680 kg)

Modelle Modellen	Beinhalter nach Goeppl Goepfels	Haltebügel		Fußstütze	
			Hielsteunen		Voetensteun
11610-01			●		
11614-01	●				
11615-01					●

### Optionen / Opties\*

\* Bitte unbedingt bei Bestellung  
 vermerken, Montage im Werk /  
 Te bestellen bij oorspronkelijke  
 opdracht, montage in fabriek



4 Räder ø 5 cm mit Bremsen  
 (Höhe + 5 cm)  
 4 zwenkwielen ø 5 cm met rem  
 (hoogte + 5 cm)




Paar Schnallen für  
 Goeppl-Beinstützen  
 Paar riemen voor beensteun  
 volgens Göpel


### Zubehör Accessoires



Verstellbare Kopfstütze  
 Hoofdsteun

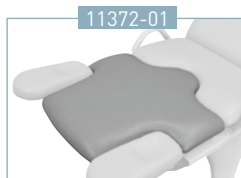

Abdeckkissen mit  
 Wandhalterung  
 Ontspankussen met muursteun  
 (für/voor 11615-01)

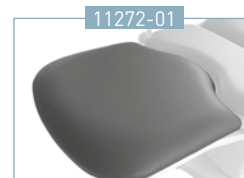

Abnehmbares Wadenpolster  
 mit Wandhalterung  
 Afneembaar beensteun  
 met muurhouder  
 (für/voor 11610-01 & 11614-01)



Infusionsständer,  
 selbstverriegelnd, 2 Haken  
 Infuushouder 1-hand hoogte  
 met 2 haken




Spritzschutzgitter  
 Spatbescherming



Halter für Zubehör ø 16 mm  
 Accessoirehouder ø 16 mm



S. Dokumentation  
 Raadpleeg de documentatie

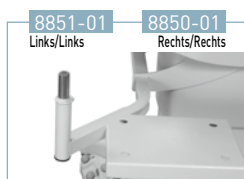

Kolposkophalterung Olympus  
 Colposcoophouder Olympus  
 (für/voor 11614-01)



Kolposkophalterung Zeiss  
 Colposcoophouder Zeiss



Kolposkophalterung Leisegang  
 Colposcoophouder Leisegang

**Halterungen für andere  
 Kolposkopiemodelle  
 auf Nachfrage**  
 Andere modellen  
 van colposcoophouders  
 op aanvraag

