

eKOMPACT

VEELZIJDIGE TECHNOLOGIE



eKOMPACT

Promotal heeft de grootste studie ooit op het gebied van medisch onderzoeksmeubilair uitgevoerd uit met 200 artsen uit 6 Europese landen.

Dit stelt ons vandaag in staat om geschikte productente ontwikkelen met een hoge toegevoegde waarde. eKompact is vandaag de in hoogte verstelbare onderzoekstafel die het beste aansluit op de behoeften van de beroepsoefenaren in de gezondheidszorg en hun omgeving. U kunt dankzij de opbergruimte en de geïntegreerde intrekbare voetbeugels, samen met de zittende positie, een volledig onderzoek uitvoeren op een tafel van 1m3. De tafel wordt een ware assistent voor zowel de patiënt als de arts door zich aan hun morfologie en voorkeuren aan te passen dankzij de opgeslagen favoriete posities en de autonome bewegingen ervan.

**GARANTIE
2 JAAR**

**BELASTINGS
CAPACITEIT
MAX. 205 KG**

**GEÏNTEGREERDE
UITTREKBARE
BEENSTEUNEN
(OP DEZELFDE HOOGTE
ALS HET ZITVLAK)**

**GEÏNTEGREERDE
WEGKLAPBARE
VOETBEUGELS**

**VARIABLE HOOGTE
48 TOT 99,5 CM
BREEDTE: 72 CM**

DE TAFEL IS UITGERUST MET:

- 1 «PASS THROUGH» ZIJLADE (52X37X9)
- 1 LADE AAN DE VOORZIJDE (50X17X7)

MODELLEN

40235-01	EKOMPACT STANDAARDMODEL
40235-20	EKOMPACT ONE TOUCH MODEL
40235-25	EKOMPACT PREMIUM MODEL (+ ZIJBEKLEDING IN ABS + DRAADLOOS VOETPEDAAL)
235150-70	NAADLOZE COMFORT BEKLEDING*

* Breedte 72 cm, compatibel met alle 3 modellen, apart te bestellen, gedemonteerd geleverd.



GELIJKHEID VAN BEHANDELING

VERMINDER DE INSPANNINGEN VAN UW PATIËNTEN MET BEPERKTE MOBILITEIT MET:

- › Een ontvangstpositie van de patiënt met een zithoogte van 48 cm
- › Zachte en veilige elektrische bewegingen
- › Moeiteloos overschakelen van de onderzoekszitpositie naar liggend dankzij de geïntegreerde beensteunverlenging

ONDERZOEK AL UW PATIËNTEN MET HETZELFDE GEMAK:

- › Belastbaar tot 205 kg
- › Comfortabele bekleding - breedte 72 cm

BEVEILIG JE EXAMENS:

- › Veiligheidssensoren
- › Veiligheidsbatterij



EFFICIËNTIE

ALLES WAT U NODIG HEEFT IN 1M³:

- › Een gynaecologische positie met wegklapbare en verstelbare voetbeugels
- › Een lade voor gynaecologische instrumenten in ABS (roestvrij staal optioneel)
- › 2 opbergladen (1 «Pass Through» zijlade & 1 lade aan de voorzijde)
- › Een rolhouder met grote capaciteit geïntegreerd in de rugleuning (max. lengte 50 cm - diameter 20 cm)
- › Stoelrails (optie)

ZORG ERVOOR DAT UW ONDERZOEKEN VLOT VERLOPEN DANKZIJ:

- › De autonome bewegingen: 1 puls is voldoende voor de positionering (afhankelijk van het model)
- › De intuïtieve bediening en de reeds ingestelde ontvangstpositie van de patiënt
- › Draadloos pedaal (optie)

MAAK HET REINIGEN VAN UW TAFEL EENVOUDIG:

- › Naadloze bekleding
- › Uitneembare ABS-bak
- › Elektrisch bedienbare zwenkwielen door vastgehouden contact (eenvoudige verplaatsing van de tafel - alleen voor reiniging)






ERGONOMIE

VERANDER DE POSITIES ZONDER ENIGE MOEITE:

- › Volledig elektrische bank: Hoogte, rugleuning
- › Registratie van 3 posities 100% instelbaar

ONGEACHT UW SPECIALITEIT

- › Gynaecoloog, huisarts, kinderarts

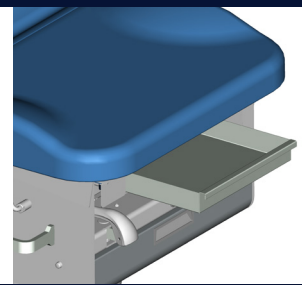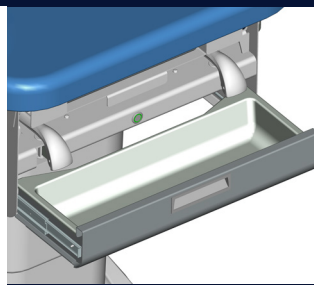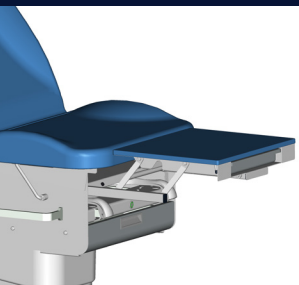

REF. 272-01

VERZONKEN,
HEFBARE BEENSTEUN

REF. 278-01

TWEE RAILS
25X10 MM

REF. 40996-01


WARMHOUDLADE

REF. 4051-20

DRAADLOOS
VOETPEDAAL

REF. 40966-01

ROESTVRIJSTALEN LADE
(TER VERVANGING VAN DE
STANDAARDLADE)

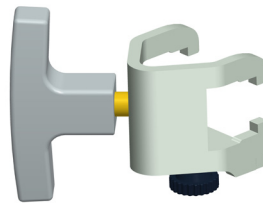

REF. 12851-01

PAAR RIEMEN VOOR
GÖPEL-BEENSTEUN

REF. 40400-1 EU/UK/US REF. 40400-2 DK/IT/AUS/CH

GEÏNTEGREERD
STOPCONTACT EN
EQUIPOTENTIALE VERBINDING

REF. 878-12





SCHUIFKLEM VOOR
RAIL 25X10 mm,
Ø 16/18 mm

REF. 879-10

DRAAIKLEM VOOR
RAIL 25x10 mm

REF. 236-01

ARMSTEUN
(+ 878-12)

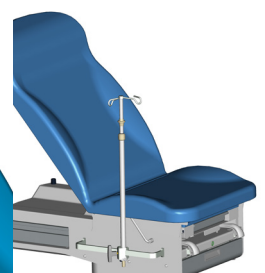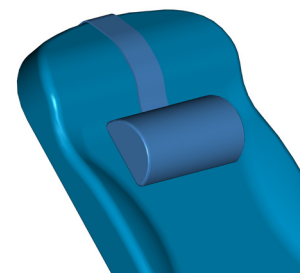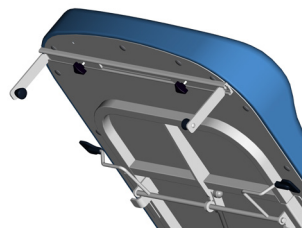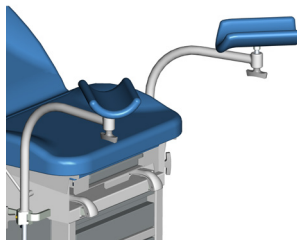

REF. 2537

HOES VOOR
ARMSTEUN

REF. 245-01

TWEE
GÖPEL-BEENSTEUNEN
(+ 2x 878-12)

REF. 2056-02




INSELBARE
ROLHOUDER
(350-800 mm)

REF. 11679-01

HOOFDSTEUN

REF. 2985-01

INFUUSSTANDAARD
2 HAKEN
ZELFBLOKKEREND
(+ 878-12)

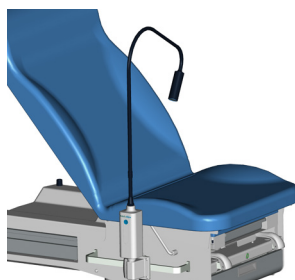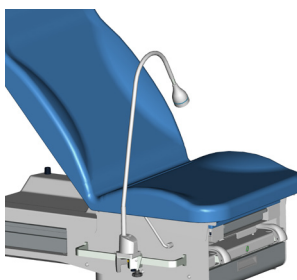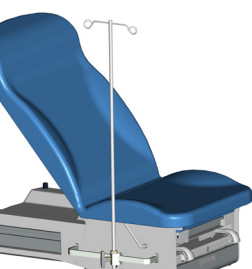

REF. 985-01

SERUMHOUDERSTAAF
2 HAKEN
(+ 878-12)

REF. 295-01

LAMPHOUDER VOOR
RAIL* 25X10 MM

REF. 295-10

WELCH-ALLYN
LAMPHOUDER


REF. 40RVS100L

RVS 100
BEVESTIGINGSARM
LINKERKANT


REF. 40RVS100R

RVS 100
BEVESTIGINGSARM
RECHTERKANT

MODEL
40235-01 / 40235-20 / 40235-25

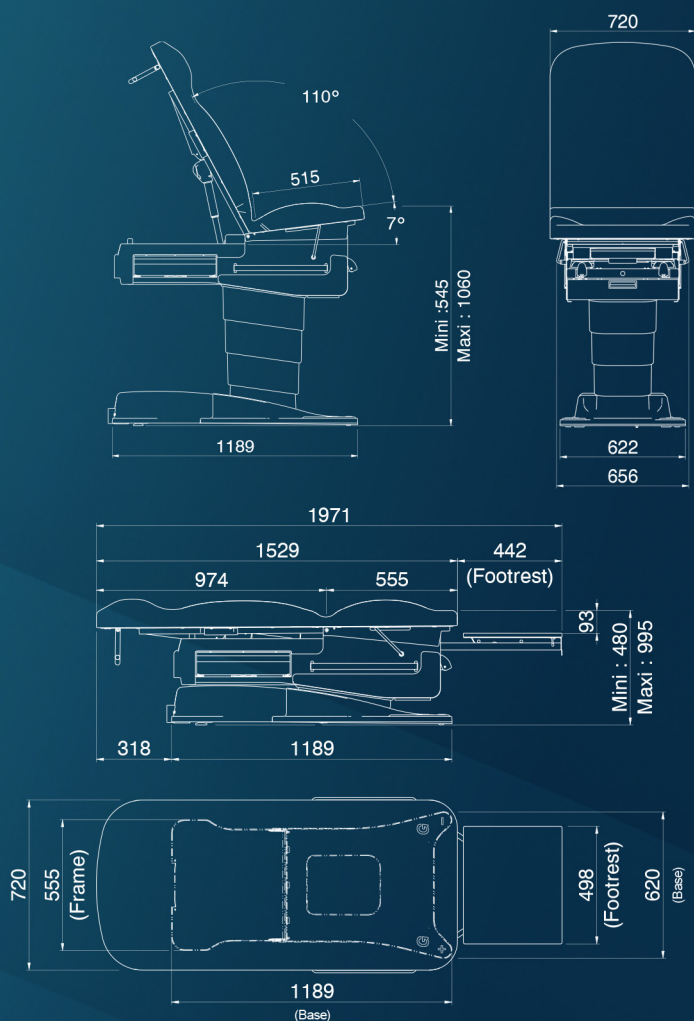

MODEL
40235-01 / 40235-20 / 40235-25 + Optie 272-01

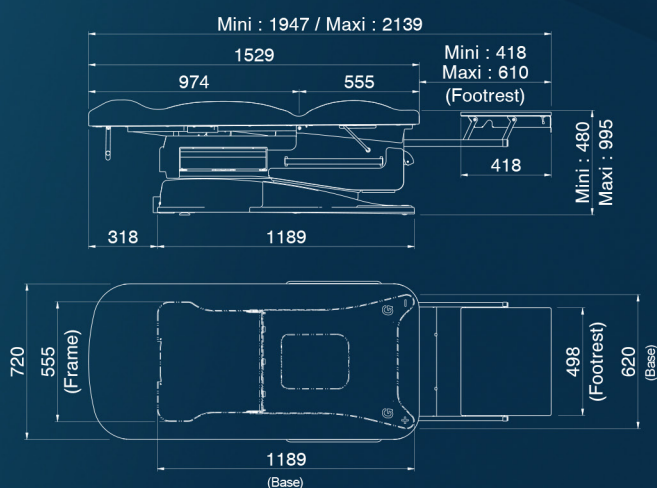

NETTOGEWICHT
COUCH : 187 kg
UPHOLSTERY : 12 kg

BRUTOGEWICHT
COUCH : 220 kg
UPHOLSTERY : 16 kg

**VERPAKKINGS-
VOLUME**
COUCH : 0,70 m³
UPHOLSTERY : 0,16 m³

BEKLEDINGSKLEUREN

32 - BLAUW		CLASSIC
93 - COTTAGEKLEUR		
35 - ROOD		
34 - GEEL		
91 - WIT		
92 - MARINEBLAUW		VITAMIN
56 - DONKER		
57 - ANTISTATISCH		
64 - DRUIVENKLEUR		
67 - LAGUNEKLEUR		
66 - SNOEPJESROOD		COSY
63 - CITROENKLEUR		
80 - HEMELKLEUR		
81 - WATERGROEN		
65 - LILA		
96 - TINKLEUR		COSY
82 - MUISGRIJS		
83 - NATUREL		
84 - CHOCOLADEKLEUR		

NOMADE® www.agence-nomade.re



22 rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, FRANCIA
Telefoon: + 33 (0)2 43 05 17 76

